


Stop-uri®

Le kit Stop-uri est constitué de 2 pinces, avec 4 paires de barrettes de réglage chacune. 2 paires de rechange de chaque taille sont également fournies en cas de perte.

Tailles des barrettes

L'utilisation des 4 tailles de barrettes permet de faire varier l'écartement entre le haut et le bas.

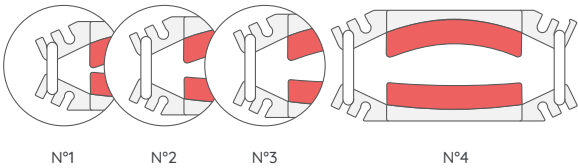


Mise en place

Placez la pince juste derrière le gland, sans décalotter, avec le pénis bien centré. La mousse plate se met dessous, la partie arrondie dessus. Assurez-vous que la peau et la pince soient propres et sèches. Choisissez les barrettes qui permettent de comprimer l'urètre sans douleur ni gêne, sans plisser la peau. Vous pouvez porter une petite protection absorbante : de légères pertes peuvent subsister (en cas d'effort notamment).

Utilisation

La pince peut être portée plusieurs heures de suite. Pensez à uriner régulièrement afin d'éviter un remplissage excessif de la vessie. La largeur du dispositif permet de préserver la circulation sanguine, qui continue de s'effectuer naturellement sur les côtés. La mousse à mémoire de forme reprend sa souplesse : alternez les deux pinces un jour sur deux pour conserver leur confort.

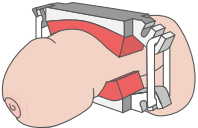


Conseils pratiques

Le maintien est meilleur avec un slip. Soyez attentif lors du passage assis/debout, la pince peut légèrement glisser. Les hommes en surpoids peuvent ressentir une gêne si la pince s'enfonce dans la peau, notamment au niveau des cuisses : dans ce cas, il est conseillé de placer un tissu fin entre la pince et la peau pour plus de confort. La nuit, les fuites sont souvent moindres ; portez de préférence une protection absorbante. Si vous gardez la pince, choisissez des barrettes plus grandes uniquement si vous n'avez plus d'érections nocturnes.

Montage et entretien

Une pince est fournie montée à titre d'exemple. Montez la seconde avec les barrettes adaptées à votre taille, disposées verticalement ou en biais selon votre confort. Nettoyez à l'eau et au savon doux, sans produits abrasifs, puis laissez sécher à l'air libre avant réutilisation.

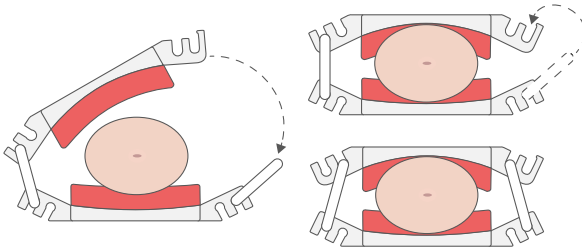

Important

En cas d'irritation de la peau, il est possible de placer une compresse entre la pince Stop-uri et la peau.

Ne doit pas être utilisée en cas d'infection aiguë des voies urinaires ni de plaies sur le pénis.

Ne pas utiliser le produit en cas d'intolérance connue envers les matériaux mentionnés.

Garantie

La pince Stop-uri est garantie 2 ans contre tous vices de fabrication (dans le cadre de son utilisation normale et préconisée), sauf la mousse. En cas de doute ou de problème contacter aussitôt votre médecin.

Matériaux

- Mousses : polyéthylène Certifié OEKO-TEX STANDARD 100,
- Pinces et barrettes : Polyamide 66 - EPLAMID 66 IMP NC Q1B802, colorant blanc
- Boîte : Polypropylène, colorant blanc

Caractéristiques

- Dimensions : Longueur 7.5 cm | Largeur 1.6 cm | Hauteur 2.9 cm minimum et 3.9 cm maximum
- Poids : 11 grammes

Contenu du kit

- 2 pinces péniennes Stop-uri,
- 3 paires de 4 tailles de barrettes : 24 barrettes,
- Boîte de rangement,
- Une notice.


Produit d'hygiène

Stop-uri®

The Stop-uri kit consists of 2 clamps, each with 4 pairs of adjustment clips. 2 spare pairs of each size are also provided in case of loss.

Clip Sizes

Using the 4 clip sizes allows you to vary the spacing between the top and bottom.

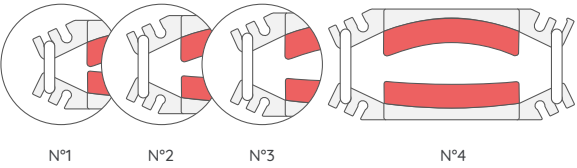


Fitting

Place the clamp just behind the glans, without retracting the foreskin, with the penis well centered. The flat foam goes underneath; the rounded part goes on top. Make sure the skin and the clamp are clean and dry. Choose the clips that compress the urethra without pain or discomfort, and without creasing the skin. You may wear a small absorbent pad: slight leakage may persist (especially during physical effort).

Use

The Penile clamp can be worn for several consecutive hours. Remember to urinate regularly to avoid excessive bladder filling. The width of the device helps maintain blood circulation, which continues naturally along the sides. The memory foam regains its softness: alternate the two clamps every other day to preserve comfort.

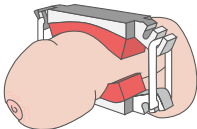


Practical Tips

Support is better when wearing briefs. Be attentive when moving from sitting to standing, as the clamp may slide slightly. Overweight men may feel discomfort if the clamp presses into the skin, particularly at the thighs; in this case, place a thin piece of fabric between the clamp and the skin for extra comfort. At night, leakage is often reduced; preferably wear an absorbent protection. If you keep the clamp on at night, choose larger clips only if you no longer have nocturnal erections.

Assembly and Care

One clamp is supplied pre-assembled as an example. Assemble the second with the clips appropriate to your size, arranged vertically or at an angle according to comfort. Clean with water and mild soap, no abrasive products, then air-dry before reuse.

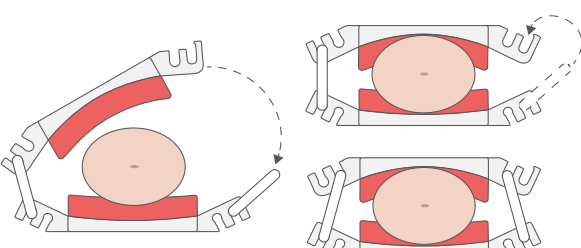

Important

In case of skin irritation, a gauze pad can be placed between the Stop-uri clamp and the skin. Do not use in cases of acute urinary tract infection or lesions on the penis. Do not use the product if you have a known intolerance to the materials listed.

Warranty

The Stop-uri clamp is covered by a 2-year warranty against manufacturing defects (under normal, recommended use), foam excluded. In case of doubt or problem, contact your physician immediately.

Materials

- Foams: Polyethylene, OEKO-TEX STANDARD 100 certified
- Clamps and clips: Polyamide 66 - EPLAMID 66 IMP NC Q1B802, white colorant
- Box: Polypropylene, white colorant

Specifications

- Dimensions: Length 7.5 cm | Width 1.6 cm | Height 2.9 cm minimum and 3.9 cm maximum
- Weight: 11 grams

Kit Contents

- 2 Stop-uri Penile clamps
- 3 pairs of 4 clip sizes: 24 clips in total
- Storage box
- Instructions leaflet


Hygiene Product

Stop-uri®

Das Stop-uri-Set besteht aus 2 Klemmen, jeweils mit 4 Paar Verstellclips. Zusätzlich werden 2 Ersatzpaare jeder Größe mitgeliefert, falls etwas verloren geht.

Größen der Verstellclips

Die Verwendung der 4 Verstellclip-Größen ermöglicht es, den Abstand zwischen Ober- und Unterteil zu variieren.

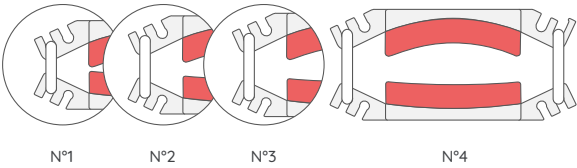


Anbringung

Platzieren Sie die Klemme direkt hinter der Eichel, ohne die Vorhaut zurückzuziehen, mit gut zentriertem Penis. Der flache Schaumstoff kommt nach unten, der abgerundete Teil nach oben. Achten Sie darauf, dass Haut und Klemme sauber und trocken sind. Wählen Sie die Verstellclips so, dass die Harnröhre ohne Schmerzen oder Beschwerden komprimiert wird, ohne dass die Haut Falten wirft. Sie können eine kleine aufsaugende Einlage tragen - leichte Verluste können weiterhin auftreten (insbesondere bei körperlicher Anstrengung).

Verwendung

Die Penisbremse kann mehrere Stunden am Stück getragen werden. Denken Sie daran, regelmäßig zu urinieren, um eine übermäßige Blasenfüllung zu vermeiden. Die Breite des Geräts trägt dazu bei, dass die Blutzirkulation seitlich natürlich weiterläuft. Der Memory-Schaum nimmt seine Weichheit wieder an: wechseln Sie die beiden Klemmen jeden zweiten Tag, um den Komfort zu erhalten.

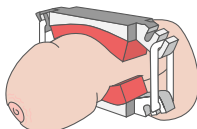


Practical Tips

Der Halt ist mit eng anliegender Unterwäsche besser. Achten Sie beim Wechsel von Sitzen zu Stehen, da die Klemme leicht verrutschen kann. Übergewichtige Männer können ein Unbehagen verspüren, wenn die Klemme in die Haut drückt, besonders im Bereich der Oberschenkel; in diesem Fall empfiehlt es sich, einen dünnen Stoff zwischen Klemme und Haut zu legen. Nachts sind Leckagen oft geringer; tragen Sie vorzugsweise eine absorbierende Einlage. Wenn Sie die Klemme nachts tragen, wählen Sie größere Verstellclips nur, wenn keine nächtlichen Erektionen mehr auftreten.

Montage und Pflege

Eine Klemme wird als Beispiel vormontiert geliefert. Montieren Sie die zweite mit den Verstellclips in Ihrer passenden Größe, senkrecht oder schräg angeordnet - je nach Komfort. Reinigen Sie mit Wasser und milder Seife, ohne Scheuermittel, und an der Luft trocknen lassen, bevor Sie sie erneut verwenden.

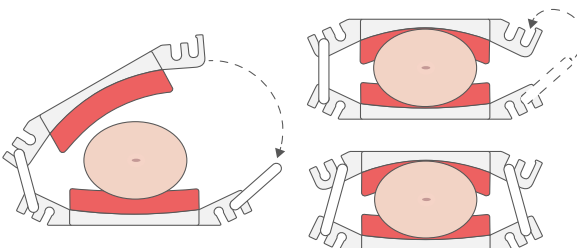

Wichtige Hinweise

Bei Hautreizungen kann eine Kompresse zwischen der Stop-uri-Klemme und der Haut platziert werden. Nicht verwenden bei akuten Harnwegsinfektionen oder Verletzungen am Penis. Nicht verwenden bei bekannter Unverträglichkeit gegenüber den genannten Materialien.

Garantie

Die Stop-uri-Klemme hat 2 Jahre Garantie gegen Herstellungsfehler (bei normalem, empfohlenem Gebrauch), Schaumstoff ausgenommen. Bei Unsicherheiten oder Problemen sofort den Arzt kontaktieren.

Materialien

- Schäume: Polyethylen, OEKO-TEX STANDARD 100 zertifiziert
- Klemmen und Verstellclips: Polyamid 66 - EPLAMID 66 IMP NC Q1B802, weißer Farbstoff
- Box: Polypropylen, weißer Farbstoff

Technische Daten

- Abmessungen: Länge 7,5 cm | Breite 1,6 cm | Höhe mind. 2,9 cm und max. 3,9 cm
- Gewicht: 11 Gramm

Lieferumfang

- 2 Stop-uri Penisbremsen
- 3 Paare in 4 Verstellclip-Größen: insgesamt 24 Verstellclips
- Aufbewahrungsbox
- Gebrauchsanweisung

Hygieneprodukt



Fabricant : Le Taiman SAS
6 Le Coquero, 56190 Lauzach
France



Distributeur : Bivea Medical
6 rue du solarium, 33170 Gradignan, France
05 57 26 09 00 / www.bivea-medical.fr



Consulter la notice



Manufacturer : Le Taiman SAS
6 Le Coquero, 56190 Lauzach
France



Distributor : Bivea Medical
6 rue du solarium, 33170 Gradignan, France
05 57 26 09 00 / www.bivea-medical.fr



Please refer to the
instructions leaflet.



Hersteller : Le Taiman SAS
6 Le Coquero, 56190 Lauzach
France



Vertriebs Händler : Bivea Medical
6 rue du solarium, 33170 Gradignan, France
05 57 26 09 00 / www.bivea-medical.fr




Gebrauchsanweisung
beachten

Stop-uri®

El kit Stop-uri está compuesto por 2 pinzas, cada una con 4 pares de clips de ajuste. También se proporcionan 2 pares de repuesto de cada tamaño en caso de pérdida.

Tamaños de los clips

El uso de los 4 tamaños de clips permite variar la separación entre la parte superior e inferior.

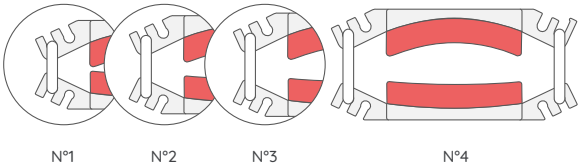


Colocación

Coloque la pinza justo detrás del glande, sin retraer el prepucio, con el pene bien centrado. La espuma plana se coloca abajo y la parte redondeada arriba. Asegúrese de que la piel y la pinza estén limpias y secas. Elija los clips que permitan comprimir la uretra sin dolor ni molestia, y sin que la piel se pliegue. Puede usar una pequeña protección absorbente: pueden persistir ligeras pérdidas (especialmente durante el esfuerzo).

Uso

La pinza urinaria puede llevarse durante varias horas seguidas. Recuerde orinar regularmente para evitar un llenado excesivo de la vejiga. El ancho del dispositivo permite mantener la circulación sanguínea, que continúa de forma natural por los lados. La espuma viscoelástica recupera su suavidad: alterne las dos pinzas cada dos días para conservar su comodidad.

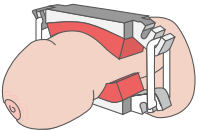


Consejos prácticos

La sujeción es mejor con ropa interior ajustada. Tenga cuidado al pasar de estar sentado a ponerse de pie, ya que la pinza puede deslizarse ligeramente. Los hombres con sobrepeso pueden sentir molestias si la pinza se hunde en la piel, especialmente en la zona de los muslos; en ese caso, se recomienda colocar un paño fino entre la pinza y la piel para mayor comodidad. Por la noche, las pérdidas suelen ser menores; use preferiblemente una protección absorbente. Si mantiene la pinza durante la noche, elija clips más grandes solo si ya no tiene erecciones nocturnas.

Montaje y mantenimiento

Se suministra una pinza montada como ejemplo. Monte la segunda con los clips adecuados a su tamaño, colocados verticalmente o en ángulo según su comodidad. Lávela con agua y jabón suave, sin productos abrasivos, y déjela secar al aire antes de volver a usarla.

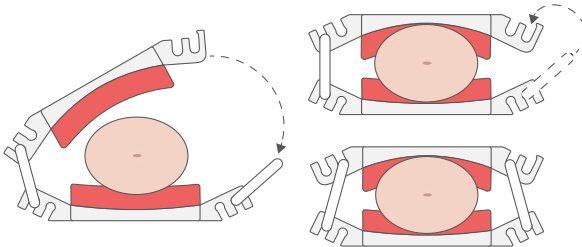

Importante

En caso de irritación de la piel, se puede colocar una compresa entre la pinza Stop-uri y la piel.

No debe utilizarse en caso de infección aguda de las vías urinarias ni en presencia de heridas en el pene.

No use el producto si existe una intolerancia conocida a los materiales mencionados.

Garantía

La pinza Stop-uri tiene una garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación (en el marco de un uso normal y recomendado), excepto la espuma. En caso de duda o problema, consulte inmediatamente a su médico.

Materiales

- Espumas: Polietileno, certificado OEKO-TEX STANDARD 100,
- Pinzas y clips: Poliamida 66 – EPLAMID 66 IMP NC Q1B802, colorante blanco,
- Caja: Polipropileno, colorante blanco.

Características

- Dimensiones: Largo 7,5 cm | Ancho 1,6 cm | Alto mínimo 2,9 cm y máximo 3,9 cm,
- Peso: 11 gramos.

Contenido del kit

- 2 pinzas urinarias Stop-uri,
- 3 pares de 4 tamaños de clips: 24 clips en total,
- Caja de almacenamiento,
- Instrucciones de uso.


Producto de higiene

Stop-uri®

Il kit Stop-uri è composto da 2 stringipene, ciascuno con 4 coppie di clip di regolazione. Sono inoltre fornite 2 coppie di ricambio per ogni misura, in caso di smarrimento.

Dimensioni delle clip

L'utilizzo delle 4 dimensioni di clip consente di variare la distanza tra la parte superiore e quella inferiore.

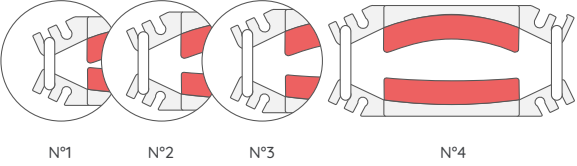


Posizionamento

Posizionare lo stringipene appena dietro il glande, senza retrarre il prepuzio, con il pene ben centrato. La schiuma piatta va posta sotto, la parte arrotondata sopra. Assicurarsi che la pelle e lo stringipene siano puliti e asciutti. Scegliere le clip che comprimano l'uretra senza dolore o fastidio, e senza piegare la pelle. È possibile utilizzare una piccola protezione assorbente: possono persistere lievi perdite (soprattutto durante uno sforzo).

Utilizzo

Lo stringipene può essere indossato per diverse ore consecutive. Ricordarsi di urinare regolarmente per evitare un riempimento eccessivo della vescica. La larghezza del dispositivo consente di mantenere la circolazione sanguigna, che continua naturalmente sui lati. La schiuma memory riprende la sua morbidezza: alternare i due stringipene un giorno sì e uno no per mantenere il comfort.

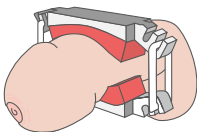


Consigli pratici

La tenuta è migliore indossando biancheria aderente. Prestare attenzione durante il passaggio da seduti a in piedi, poiché lo stringipene può scivolare leggermente. Gli uomini in sovrappeso possono avvertire fastidio se lo stringipene preme sulla pelle, in particolare nella zona delle cosce; in tal caso si consiglia di collocare un tessuto sottile tra lo stringipene e la pelle per un maggiore comfort. Durante la notte, le perdite sono spesso ridotte; indossare preferibilmente una protezione assorbente. Se si mantiene lo stringipene di notte, scegliere clip più grandi solo se non si verificano più erezioni notturne.

Montaggio e manutenzione

Uno stringipene viene fornito già montato come esempio. Montare il secondo con le clip adatte alla propria misura, disposte in verticale o in diagonale secondo la comodità personale. Pulire con acqua e sapone neutro, senza prodotti abrasivi, e lasciare asciugare all'aria prima del riutilizzo.

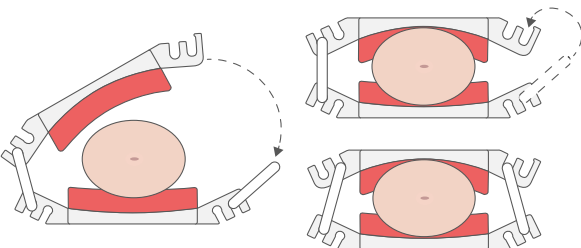

Importante

In caso di irritazione della pelle, è possibile collocare una garza tra lo stringipene Stop-uri e la pelle. Non utilizzare in caso di infezione acuta delle vie urinarie o di lesioni sul pene. Non utilizzare il prodotto in caso di nota intolleranza ai materiali indicati.

Garanzia

Lo stringipene Stop-uri è garantito per 2 anni contro eventuali difetti di fabbricazione (nell'ambito di un uso normale e raccomandato), ad eccezione della schiuma. In caso di dubbi o problemi, consultare immediatamente il proprio medico.

Materiali

- Schiume: Polietilene, certificato OEKO-TEX STANDARD 100,
- Stringipene e clip: Poliammide 66 – EPLAMID 66 IMP NC Q1B802, colorante bianco,
- Scatola: Polipropilene, colorante bianco.

Caratteristiche

- Dimensioni: Lunghezza 7,5 cm | Larghezza 1,6 cm | Altezza minima 2,9 cm e massima 3,9 cm,
- Peso: 11 grammi.

Contenuto del kit

- 2 stringipene Stop-uri,
- 3 coppie di 4 dimensioni di clip: 24 clip in totale,
- Scatola di conservazione,
- Istruzioni per l'uso.


Prodotto igienico

Stop-uri®

O kit Stop-uri é composto por 2 clamps penianos, cada um com 4 pares de cliques de ajuste. Também são fornecidos 2 pares de reposição de cada tamanho, em caso de perda.

Tamanhos dos cliques

O uso dos 4 tamanhos de cliques permite variar o espaçamento entre a parte superior e a parte inferior.

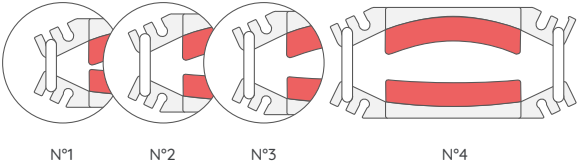


Colocação

Coloque o clamp logo atrás da glande, sem retrair o prepúcio, com o pênis bem centrado. A espuma plana deve ficar por baixo, e a parte arredondada por cima. Certifique-se de que a pele e o clamp estejam limpos e secos. Escolha os cliques que comprimam a uretra sem dor nem desconforto, e sem dobrar a pele. Pode usar uma pequena proteção absorbente: podem persistir pequenas perdas (especialmente durante o esforço físico).

Utilização

O clamp peniano pode ser usado por várias horas consecutivas. Lembre-se de urinar regularmente para evitar um enchimento excessivo da bexiga. A largura do dispositivo permite manter a circulação sanguínea, que continua naturalmente pelos lados. A espuma viscoelástica recupera a sua suavidade: altere entre os dois clamps a cada dois dias para preservar o conforto.

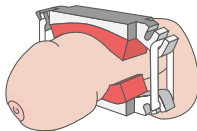


Dicas práticas

A fixação é melhor com roupa interior justa. Tenha atenção ao levantar-se ou sentar-se, pois o clamp pode escorregar ligeiramente. Homens com excesso de peso podem sentir desconforto se o clamp pressionar a pele, especialmente na zona das coxas; neste caso, recomenda-se colocar um tecido fino entre o clamp e a pele para maior conforto. Durante a noite, as perdas são geralmente menores; use de preferência uma proteção absorbente. Se mantiver o clamp durante a noite, escolha cliques maiores apenas se já não tiver ereções noturnas.

Montagem e manutenção

Um clamp é fornecido pré-montado como exemplo. Monte o segundo com os cliques adequados ao seu tamanho, dispostos verticalmente ou na diagonal, conforme o conforto. Lave com água e sabão neutro, sem produtos abrasivos, e deixe secar ao ar antes de reutilizar.

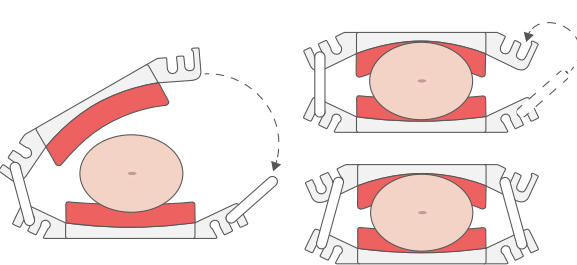

Importante

Em caso de irritação da pele, pode colocar uma compressa entre o clamp Stop-uri e a pele. Não deve ser utilizado em caso de infecção aguda do trato urinário ou de feridas no pênis. Não utilize o produto se tiver intolerância conhecida aos materiais indicados.

Garantia

O clamp Stop-uri tem uma garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação (em uso normal e recomendado), exceto a espuma. Em caso de dúvida ou problema, contacte imediatamente o seu médico.

Materiais

- Espumas: Polietileno, certificado OEKO-TEX STANDARD 100,
- Clamps e cliques: Poliamida 66 – EPLAMID 66 IMP NC Q1B802, pigmento branco,
- Caixa: Polipropileno, pigmento branco.

Características

- Dimensões: Comprimento 7,5 cm | Largura 1,6 cm | Altura mínima 2,9 cm e máxima 3,9 cm,
- Peso: 11 gramas.

Conteúdo do kit

- 2 clamps penianos Stop-uri,
- 3 pares de 4 tamanhos de cliques: 24 cliques no total,
- Caixa de armazenamento,
- Folheto de instruções.

Produto de higiene



Fabricante : Le Taïman SAS
6 Le Coquero, 56190 Lauzach
France



Distribuidor : Bivea Medical
6 rue du solarium, 33170 Gradignan, France
05 57 26 09 00 / www.bivea-medical.fr



Lea atentamente las instrucciones de uso.



Produttore : Le Taïman SAS
6 Le Coquero, 56190 Lauzach
France



Distributore : Bivea Medical
6 rue du solarium, 33170 Gradignan, France
05 57 26 09 00 / www.bivea-medical.fr



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Fabricante : Le Taïman SAS
6 Le Coquero, 56190 Lauzach
France



Distribuidor : Bivea Medical
6 rue du solarium, 33170 Gradignan, France
05 57 26 09 00 / www.bivea-medical.fr



Leia atentamente o folheto de instruções.